


订货信息 Ordering Information



适配导丝: 0.018" / 0.035"

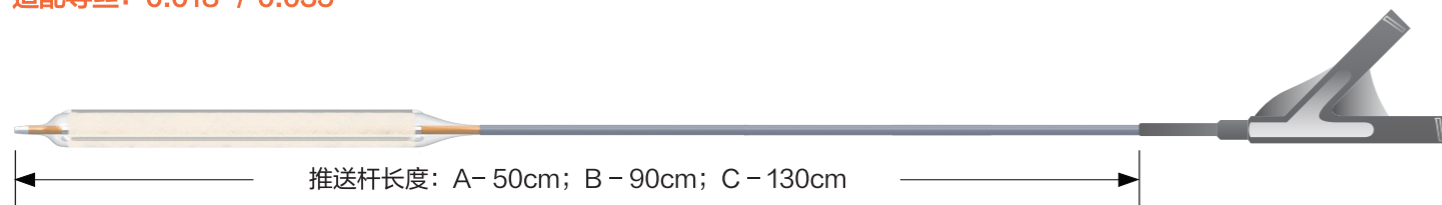

0.018"	球囊直径				
球囊长度	4.00mm	5.00mm	6.00mm	7.00mm	8.00mm
20mm	ASD18-4020A/B/C	ASD18-5020A/B/C	ASD18-6020A/B/C	ASD18-7020A/B/C	ASD18-8020A/B/C
40mm	ASD18-4040A/B/C	ASD18-5040A/B/C	ASD18-6040A/B/C	ASD18-7040A/B/C	ASD18-8040A/B/C
60mm	ASD18-4060A/B/C	ASD18-5060A/B/C	ASD18-6060A/B/C	ASD18-7060A/B/C	ASD18-8060A/B/C
80mm	ASD18-4080A/B/C	ASD18-5080A/B/C	ASD18-6080A/B/C	ASD18-7080A/B/C	ASD18-8080A/B/C
命名压	8atm				
额定爆破压	20atm				18atm

0.035"	球囊直径				
球囊长度	4.00mm	5.00mm	6.00mm	7.00mm	8.00mm
20mm	ASD35-4020A/B/C	ASD35-5020A/B/C	ASD35-6020A/B/C	ASD35-7020A/B/C	ASD35-8020A/B/C
40mm	ASD35-4040A/B/C	ASD35-5040A/B/C	ASD35-6040A/B/C	ASD35-7040A/B/C	ASD35-8040A/B/C
60mm	ASD35-4060A/B/C	ASD35-5060A/B/C	ASD35-6060A/B/C	ASD35-7060A/B/C	ASD35-8060A/B/C
80mm	ASD35-4080A/B/C	ASD35-5080A/B/C	ASD35-6080A/B/C	ASD35-7080A/B/C	ASD35-8080A/B/C
命名压	8atm				
额定爆破压	20atm				18atm

Dissolve™ AV

鼎科医疗
DK MEDTECH

NC 外周刻痕药物球囊
Peripheral Scoring DCB

国械注准20233030980



鼎科医疗技术(苏州)有限公司
☎ 0512-69880808
✉ cs@dkmedtech.com
🌐 www.dkmedtech.com
📍 苏州工业园区苏虹西路9号新虹产业园5号楼

鼎科医疗
DK MEDTECH


三剑合璧
守护通途

第 **3** IN 1 代药物球囊



高压
刻痕 药涂

- 国械注准20233030980
- 适用于血液透析通路的经皮腔内血管成形术
自体或人工动静脉透析通路狭窄病变的PTA术治疗

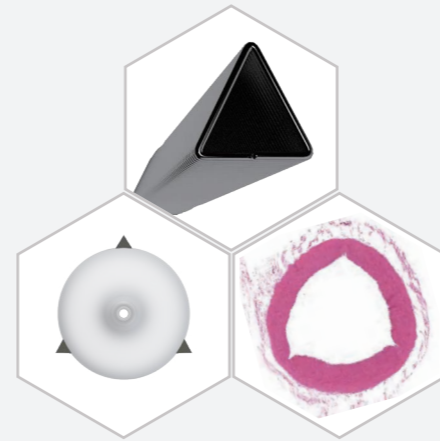


定向刻痕

- 三角镍钛金属刻痕件固定于球囊表面
- 刻痕件顶部压强为传统球囊的**598**倍
- 定向、规则扩张狭窄
- 轻松过弯，贴合血管形态





中国专利: CN201810478242.X

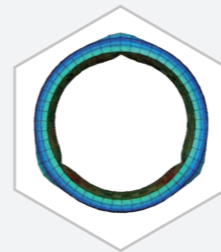

高爆破压

- 最高RBP: 20atm
 - 更高的扩张成功率与管腔获得
- 上市前RCTI临床试验 (NCT04226599)
- 靶病变扩张成功率:
实验组 **96.33%** vs 对照组 **91.82%**
- 术后即刻管腔获得:
实验组 **3.40mm** vs 对照组 **2.93mm**

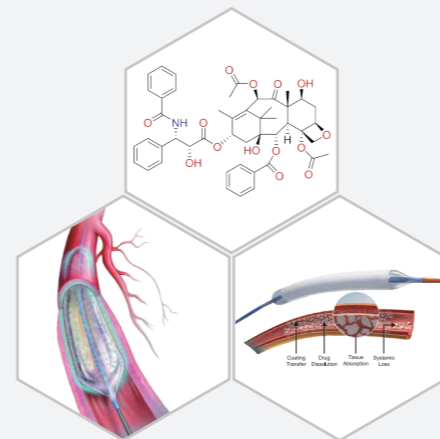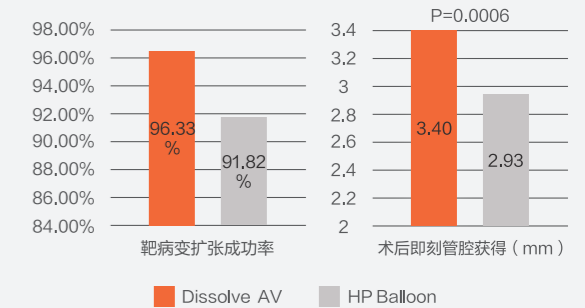

药物涂层

- 上市前RCTI临床试验 (NCT04226599)
 - 术后6个月靶病变一期通畅率
- N=220 所有病变 试验组 **82.8%** vs 对照组 **59.0%**
- N=40 AVG病变 试验组 **78.3%** vs 对照组 **29.4%**

