



适配0.018"导丝	球囊直径	球囊长度	命名压	额定爆破压
PTA18-2020A/B/C	2.0mm	20mm	10atm	20atm
PTA18-2040A/B/C		40mm		
PTA18-2060A/B/C		60mm		
PTA18-2080A/B/C		80mm		
PTA18-20120A/B/C		120mm		
PTA18-20150A/B/C		150mm		
PTA18-2520A/B/C	2.5mm	20mm	10atm	20atm
PTA18-2540A/B/C		40mm		
PTA18-2560A/B/C		60mm		
PTA18-2580A/B/C		80mm		
PTA18-25120A/B/C		120mm		
PTA18-25150A/B/C		150mm		
PTA18-3020A/B/C	3.0mm	20mm	10atm	20atm
PTA18-3040A/B/C		40mm		
PTA18-3060A/B/C		60mm		
PTA18-3080A/B/C		80mm		
PTA18-30120A/B/C		120mm		
PTA18-30150A/B/C		150mm		
PTA18-4020A/B/C	4.0mm	20mm	8atm	20atm
PTA18-4040A/B/C		40mm		
PTA18-4060A/B/C		60mm		
PTA18-4080A/B/C		80mm		
PTA18-40120A/B/C		120mm		
PTA18-40150A/B/C		150mm		
PTA18-5020A/B/C	5.0mm	20mm	8atm	14atm
PTA18-5040A/B/C		40mm		
PTA18-5060A/B/C		60mm		
PTA18-5080A/B/C		80mm		
PTA18-50120A/B/C		120mm		
PTA18-50150A/B/C		150mm		
PTA18-6020A/B/C	6.0mm	20mm	8atm	14atm
PTA18-6040A/B/C		40mm		
PTA18-6060A/B/C		60mm		
PTA18-6080A/B/C		80mm		
PTA18-60120A/B/C		120mm		
PTA18-60150A/B/C		150mm		
PTA18-7020A/B/C	7.0mm	20mm	8atm	12atm
PTA18-7040A/B/C		40mm		
PTA18-7060A/B/C		60mm		
PTA18-7080A/B/C		80mm		
PTA18-70120A/B/C		120mm		
PTA18-70150A/B/C		150mm		
PTA18-8020A/B/C	8.0mm	20mm	8atm	12atm
PTA18-8040A/B/C		40mm		
PTA18-8060A/B/C		60mm		
PTA18-8080A/B/C		80mm		
PTA18-80120A/B/C		120mm		
PTA18-80150A/B/C		150mm		

适配0.035"导丝	球囊直径	球囊长度	命名压	额定爆破压
PTA35-4020A/B/C	4.0mm	20mm	8atm	20atm
PTA35-4040A/B/C		40mm		
PTA35-4060A/B/C		60mm		
PTA35-4080A/B/C		80mm		
PTA35-40100A/B/C		100mm		
PTA35-40120A/B/C		120mm		
PTA35-40150A/B/C	150mm			
PTA35-5020A/B/C	5.0mm	20mm	8atm	24atm
PTA35-5040A/B/C		40mm		
PTA35-5060A/B/C		60mm		
PTA35-5080A/B/C		80mm		14atm
PTA35-50100A/B/C		100mm		
PTA35-50120A/B/C		120mm		
PTA35-50150A/B/C	150mm			
PTA35-6020A/B/C	6.0mm	20mm	8atm	24atm
PTA35-6040A/B/C		40mm		
PTA35-6060A/B/C		60mm		
PTA35-6080A/B/C		80mm		14atm
PTA35-60100A/B/C		100mm		
PTA35-60120A/B/C		120mm		
PTA35-60150A/B/C	150mm			
PTA35-7020A/B/C	7.0mm	20mm	8atm	20atm
PTA35-7040A/B/C		40mm		
PTA35-7060A/B/C		60mm		
PTA35-7080A/B/C		80mm		12atm
PTA35-70100A/B/C		100mm		
PTA35-70120A/B/C		120mm		
PTA35-70150A/B/C	150mm			
PTA35-8020A/B/C	8.0mm	20mm	8atm	12atm
PTA35-8040A/B/C		40mm		
PTA35-8060A/B/C		60mm		
PTA35-8080A/B/C		80mm		
PTA35-80100A/B/C		100mm		
PTA35-80120A/B/C		120mm		
PTA35-80150A/B/C	150mm			
PTA35-9020A/B/C	9.0mm	20mm	6atm	12atm
PTA35-9040A/B/C		40mm		
PTA35-9060A/B/C		60mm		
PTA35-9080A/B/C	10.0mm	80mm	6atm	10atm
PTA35-10020A/B/C		20mm		
PTA35-10040A/B/C		40mm		
PTA35-10060A/B/C	12.0mm	60mm	6atm	10atm
PTA35-10080A/B/C		80mm		
PTA35-12020A/B/C		20mm		
PTA35-12040A/B/C		40mm		
PTA35-12060A/B/C		60mm		
PTA35-12080A/B/C		80mm		

DKonquer全系列产品适配推送杆长度: A-50cm; B-90cm; C-130cm

NC 外周球囊扩张导管
Peripheral Balloon Catheter

国械注准20203030190



全型全能
无处不达



鼎科医疗技术(苏州)有限公司
 ☎ 0512-69880808
 ✉ cs@dkmedtech.com
 🌐 www.dkmedtech.com
 📍 苏州工业园区苏虹西路9号新虹产业园5号楼

公司外周产品线 / Peripheral Pipelines




D-Konquer®
外周球囊扩张导管

18/35系统兼备型号齐全



D-Kutting®
刻痕球囊扩张导管

可以过弯的切割类球囊

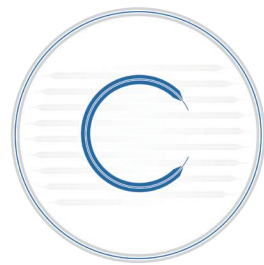

D-Kaptain®
高压球囊导管套件

国产最高压力 RBP 26atm



Dissolve® AV
外周刻痕药物球囊

全球独家: 高压+刻痕+药涂

参数对比 / Comparative Parameters

品牌	尖端外径	折叠外径	命名压外径	20atm外径	直径变化
DKonquer 6.0*40mm	0.038"	0.069"	5.94mm NP=8atm	6.41mm	7.33%
A *** 6.0*40mm	0.044"	0.073"	5.90mm NP=6atm	6.52mm	9.51%
M *** 6.0*40mm	0.038"	0.069"	5.51mm NP=10atm	6.08mm	9.38%

- 适用于肾动脉、股动脉、髂动脉、锁骨下动脉、腿动脉、颈动脉、胫动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，但不包括颅内动静脉血管
- 适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变

柔性尖端

减少血管内壁划伤
亲水涂层
类硅胶材质

超短尖端

减少对非靶血管干扰
高精度激光焊接

球囊防滑

提高扩张时锚定性
摩擦系数高于同类产品25%以上

高爆破压

提高扩张成功率
实时爆破压数据
> 30atm (4/5mm)
> 25atm (6/7mm)

非顺应性

避免过度扩张

锐角球囊近端

减小回撤阻力
球囊近端锥角 < 30°

双腔推送导管

不易弯折、耐受高压、推送力强

